
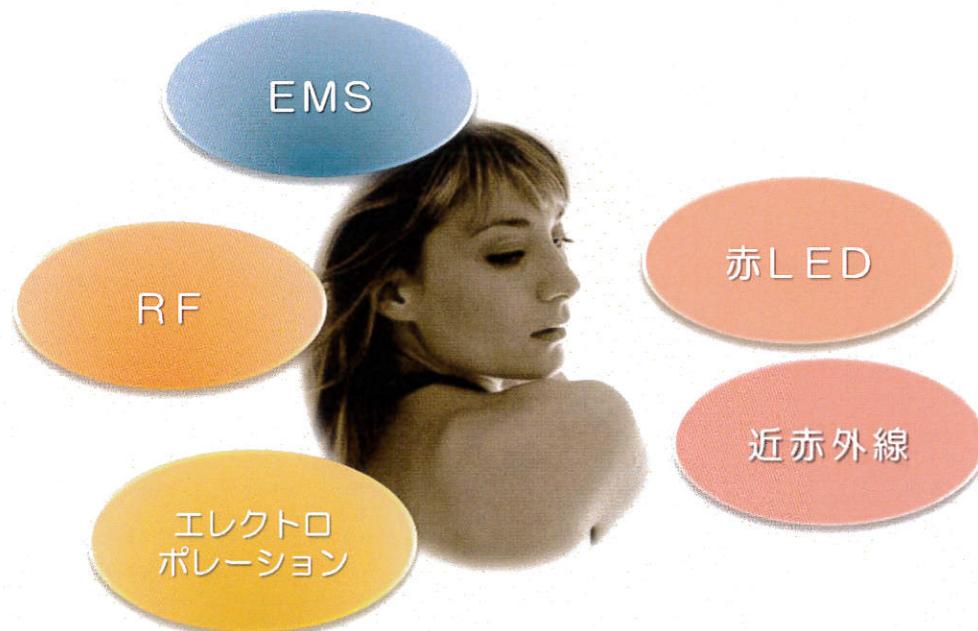


フェイスエステ&ヘッドスパ
ホームエステ複合美顔機器

PRIMA PRO プリマプロ

一人一人異なる肌の悩み、年齢、季節、環境で変化する肌
5種類の最新テクノロジーによる7種類のエステメニューが、
今一番綺麗な貴女に整える

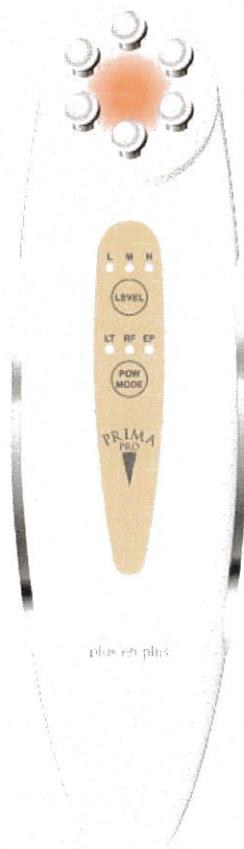

今一番綺麗な貴女に整える プリマプロ

一人一人 肌の状態、肌の悩みは異なります。
ストレス、肌環境、季節、加齢等で、肌は絶えず変化します。


プリマプロは、貴女の今のお肌に最適なトリートメントを施し、
今一番綺麗な貴女に整えます

5種類の最新テクノロジーが、フェイス、ヘッド、ボディの部分に
簡単なポイントケアから本格的なエステコースを施し
毎日、楽しく、美しくなる喜びをご実感頂ける
ホームエステ複合美容機器です。

安全で効果的なハイスペック

5種類の各テクノロジーは
安全で効果的な仕様
(周波数、波長)に設定

EMS/RF/エレクトロポレーション
の各機能に相乗効果のある
2種のライトエステを組み合わせて
トリートメントを施す事で、
効果性をアップ

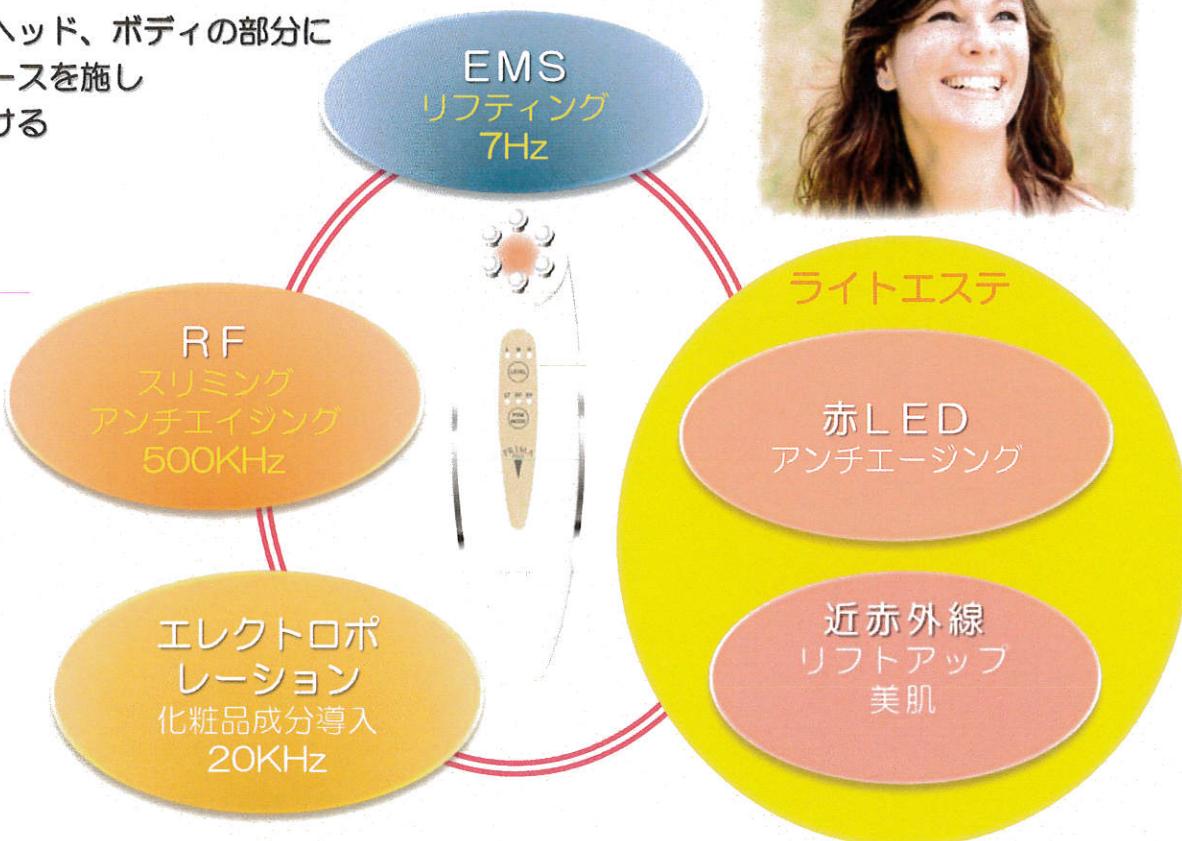

今一番綺麗な貴女に整える プリマプロの特徴

- 5種類の最新テクノロジー
- 安全で効果的なハイスペック仕様
- 3種の各機能にライトエステを組み合わせ、効果性アップ
- フェイス、ヘッド、ボディの部分使用も可能
- 7種類のエステメニュー
 - 簡単ポイントケアからエステコースまで用途が満載
 - 各機能の部分使用でも、短時間で効果的なトリートメントが可能



シワ＝エレクトロポレーション

頬たるみ＝EMS

たるんだ顎＝RF

- 1年中ご使用可能＝季節に対応したケアが可能
- 長く愛用できる＝肌年齢に対応したケアが可能
- 継続できる＝毎日でも、無理なくご使用可能
- ハンディタイプ
 - どこでも、気軽に、楽しくホームエステを楽しめる

小顔ケアプログラム1週間の例

日=⑦	エステコース4	15分
月/水/金=①	シェイピング	5分
火/木=④	エステコース1	10分
土=②	スリミング	5分

7種類のメニュー

各機能は、赤LED+近赤外線を照射しながら作動

① リフティング シェイピング	EMS
② スリミング アンチエイジング	RF
③ 化粧品成分導入	エレクトロポレーション
④ エステコース1	EMS +RF
⑤ エステコース2	EMS +エレクトロポレーション
⑥ エステコース3	RF +エレクトロポレーション
⑦ エステコース4	EMS +RF +エレクトロポレーション

プリマプロのヘッドスパ

アンチエージング

モード：EMS

目的：フェイスリフト、シワの改善

頭は、顔の一部、頭筋のトリートメントで
顔全体を上部からリフトアップ
老廃物を流し、血行も促進
顔全体が健やかで明るい肌に



リラクゼーション

モード：EMS

目的：リフレッシュ

頭皮と頭筋刺激により
老廃物を流し、血行も促進
疲労、目の疲れ
ストレスを感じやすい方に



頭皮ケア

モード：EMS

目的：育毛、抜け毛予防、美髪

頭皮と頭筋刺激により
老廃物を流し、血行も促進
健康で美しい毛髪を育成できる
頭皮に整える




育毛剤の導入

モード：エレクトロポレーション



目的：育毛剤の効果アップ

お手持ちの育毛剤の浸透を促進
育毛剤の効果をアップ

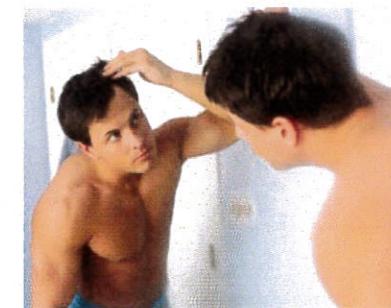

赤LED+赤近外線LED


赤LEDと近赤外線LEDは、皮膚の深部まで光のエネルギーが
浸透でき、各組織の細胞再生を促す

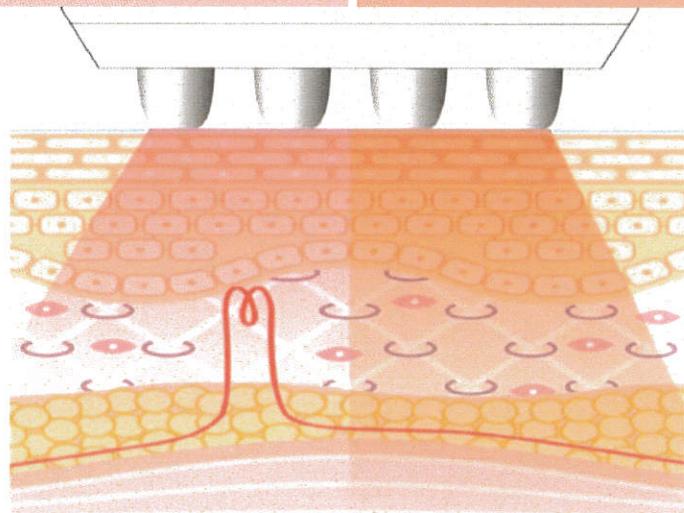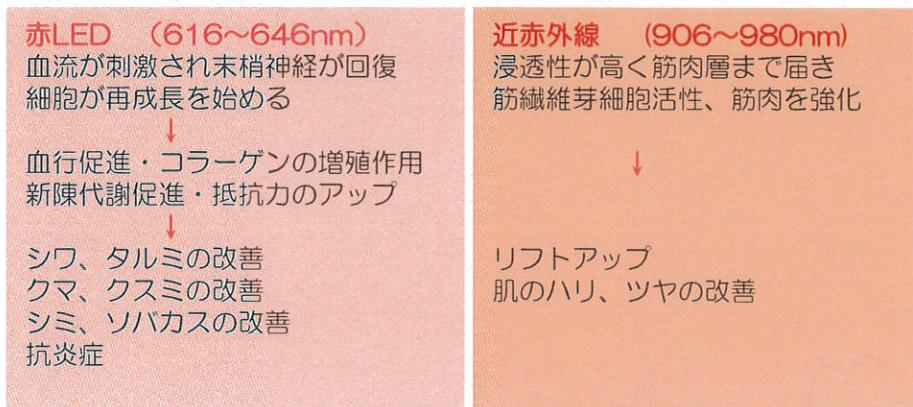

EMS

EMS= Electric Muscle Stimulation=電気的筋肉刺激
電流を流し直接筋肉を刺激し行う運動

- 運動強化しにくく緩んだ表情筋を効果的に運動させ
筋肉を強化し、引き締め、リフトアップ
- リンパの流れをスムーズに整え老廃物を流し、
血行促進作用で、健やかで美しい肌へ導く

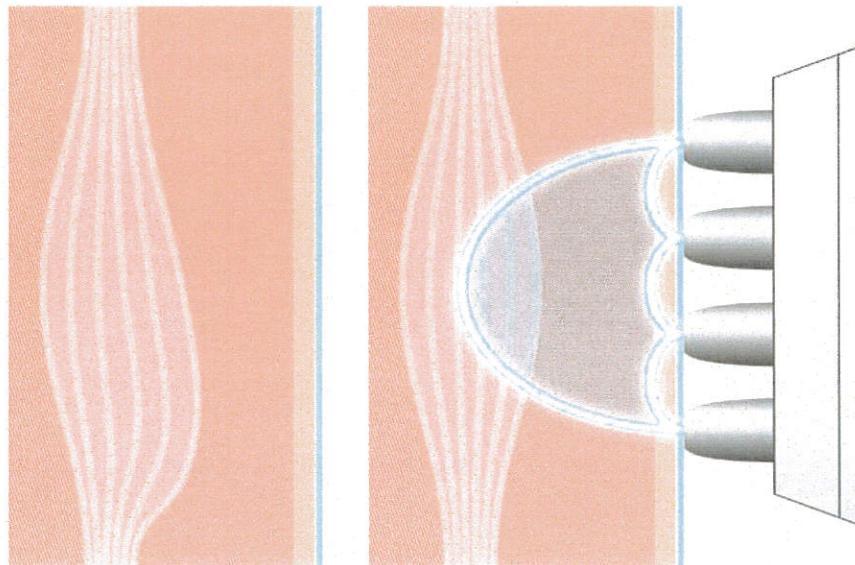

RF

RF=Radio Frequency=ラジオ波=電磁波の一種
RFを身体に流すとその部分で発熱
RFの熱エネルギーでアンチエイジング、スリミングを行う


- 美容効果のあるRFの周波数=300kHz~6MHz
1. コラーゲンの修復
RF熱エネルギーが、緩んだコラーゲンを引き締め
シワやタルミを改善
 2. 脂肪の分解とセルライトの改善
 - 脂肪細胞を加熱する事で脂肪細胞の代謝を高め、脂肪の分解を促進し、細胞のサイズを小さくする
 - 毛細血管、リンパの流れを改善し、セルライトを改善



エレクトロポレーション

皮膚表面からは浸透しにくい高分子の
美容成分（コラーゲン、ヒアルロン酸、脂肪溶解剤等）を
皮膚内部へ送り込むトリートメント
即効性があり効果的

1. 交流電流をパルス発信（小刻みに流す発信方法）で皮膚に強く流す
2. 一時的に皮膚の細胞と細胞の間に隙間ができる
3. 高分子の美容成分が通れる道ができる
4. 基底層、真皮層に必要な成分が、直接送り込める

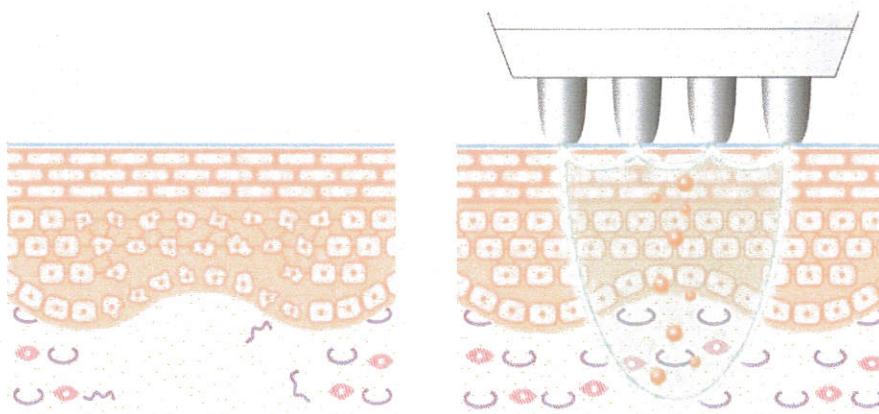


細胞再生

赤LED+近赤外線

■作用■
光エネルギーが深層から
トリートメント
筋肉、コラーゲン、肌細胞
を再生

■効果■
シワ・タルミの改善
クマ・クスミの改善
シミ・ソバカスの改善
抵抗力のアップ

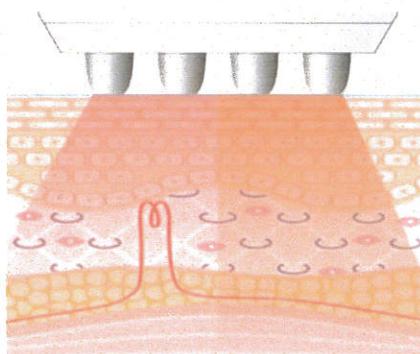


リフティング シェイピング

EMS

■作用■
緩んだ表情筋を強化し
引き締め、引き上げる
老廃物除去、血行促進

■効果■
リフトアップ
小顔
毛穴の引き締め
頭皮ケア

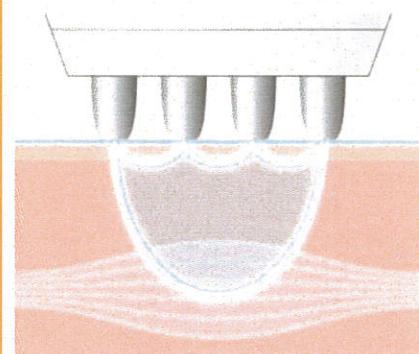


スリミング シェイピング

RF

■作用■
コラーゲンの引き締め
脂肪細胞の縮小
老廃物除去、血行促進

■効果■
シワの改善
リフトアップ
小顔
スリミング
セルライトの除去

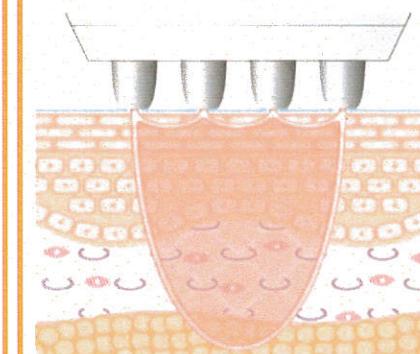


美容成分の導入

エレクトロポレーション

■作用■
コラーゲン等高分子成分を
ターゲットに届ける

■効果■
美容成分の効果をアップ

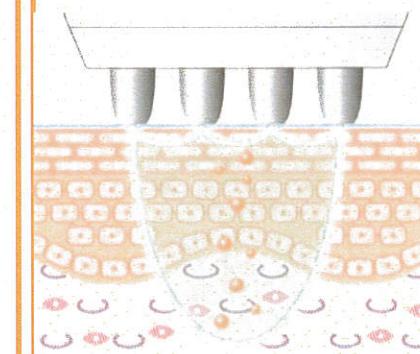

prima プロの専用ジェル ベースジェル

使用モード： EMS / RF 容量 200g

EMS、RFの効果を最大限に引き出すため
通電を良好し、肌の深層まで潤いをキープする
プリマプロ専用ジェル

- 高保湿成分ヒアルロン酸、各種海藻エキス
植物エキスを配合。
- 毎日の保湿ジェルとしてもお薦め

注) *ジェルによって電流の流れは変わります。他メーカーのジェル
によるトリートメントでは、効果的に作用しない場合があります。

<全成分>

水、グリセリン、プロパンジオール、ダイズ種子エキス
ダイズ発酵エキス、クロレラエキス、褐藻エイース、紅藻エキス
緑藻エキス、アロエベラ葉エキス、グレープフルーツ果実エキス
カッコンエキス、アラントイン、カルボマー
ヒアルロン酸Na、水酸化K、BG、_{1,2}ヘキサンジオール
フェノキシエタノール、カプリリルグリコール

バイオジェル

使用モード：エレクロポーレーション 容量 40ml

テロペプチドコラーゲン美容ジェル

- テロペプチドコラーゲンとは
アレルギーを引き起こしやすい蛋白質であるコラーゲンを
特殊処理し、アレルギー性を大幅に低下させたコラーゲン
- 保湿、シワ、シミ、美白、リフトアップ
唇のボリュームアップ、バストアップ、目元のタルミの改善
- 毎日の美容ジェルとしてもお薦め

<全成分>

水、スクワラン、ステアリン酸PEG-150、リシン
フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン
ブチルパラベン、プロピルパラベン、PG
EDTA-Na、アラントイン、グリコール酸、リン酸K
リン酸2Na、サクシニルアテロコラーゲン
PEG-40水添ヒマシ油、ヒドロキシアニソール
アクリレーツコポリマーNa、ミネラルオイル
PPG-1トリデセス-6、オレイン酸ソルビタン
(C₁₀, 11) イソパラフィン、BG、ダイズエキス

商品概要

概要

商品名 : プリマ プロ

カテゴリー : ハンディタイプ家庭用複合美容機器

定価 :

仕様

- 本体サイズ ……長さ168×幅47×高さ46 (mm)
- 本体重量…… 110g
- 電源 …… ACアダプターDC12V 500mA
- 各機能周波数、波長
 - EMS=7Hz
 - エレクトロポレーション=20KHz
 - RF=500KHz
 - 近赤外線LED=940nm
 - 赤LED=630nm
- タイマー=オートタイマー
 - 5分後自動で終了
- 出力レベル
 - 3段階

商品構成

- 本体……… 1
アダプター…… 1
ベースジェル… 1
バイオジェル… 1
取扱説明書…… 1
化粧箱……… 1



消耗品

- ベースジェル 200g
バイオジェル 40ml